



SISTEMA DE LIGADURA HORIZON™

El nombre que conoce, el producto en el que confía.

Todos los clips para ligadura Horizon™ se envasan estériles. Los sistemas de clip para ligadura se diferencian en las características de cierre del clip. Es responsabilidad del usuario confirmar la seguridad de los clips en los vasos u otros tejidos. Protegido por las patentes de los EE. UU. 4936447, 4973949 y 5026382.

Teleflex, Hemoclip, Horizon y Weck son marcas comerciales de Teleflex Incorporated o sus afiliadas registradas en los EE. UU. u otros países.

Teleflex es un proveedor global de productos médicos diseñados para que los prestadores de atención de la salud puedan ofrecer protección frente a las infecciones y mejorar la seguridad del paciente y el prestador. La empresa se especializa en productos y servicios para el acceso vascular, las vías respiratorias, anestesia general y local, el cuidado cardíaco, urología y cirugía. Teleflex también suministra productos especializados para los fabricantes de dispositivos.

© 2014 Teleflex Incorporated. Todos los derechos reservados. LA_000251_EN

SISTEMA DE LIGADURA HORIZON™

El nombre que conoce, el producto en el que confía.



CONFIANZA PARA CIRUJANOS DE TODO EL MUNDO DESDE 1964

Durante los últimos cincuenta años, la marca Weck® ha seguido perfeccionando la ciencia de los cierres para diseñar una línea de soluciones para ligadura de metal y polímero que buscan los cirujanos de todo el mundo.

Teleflex® ofrece productos para ligadura diseñados para adaptarse a sus preferencias y necesidades de procedimientos únicas. Los sistemas para ligadura de metal Horizon™ y Hemoclip® satisfacen su necesidad de clips para ligadura de metal tradicionales para su uso en aplicaciones quirúrgicas cardiovasculares y generales. Gracias a estar disponibles en un rango de tamaños, los cirujanos han confiado en los clips de metal Weck por generaciones.



Para obtener más información, visite
www.WECKLIGATION.com

SISTEMA DE LIGADURA HORIZON™

Diseñado para satisfacer sus necesidades.

LOS CLIPS Y APLICADORES HORIZON ESTÁN DISEÑADOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE CIRUJANOS, PERSONAL DE ENFERMERÍA Y OTROS INTEGRANTES DEL PERSONAL DEL QUIRÓFANO.



EL CLIP: EXCELENCIA FUNCIONAL

La forma en herradura preformada del clip Horizon envuelve el tejido con un cierre preciso punta con punta. El alambre con forma de corazón está diseñado para dar a cada clip un agarre firme a los vasos, mientras que la sección transversal triangular de la pata del clip maximiza el contacto de las superficies entre el clip y la mandíbula, lo que prácticamente elimina la caída del clip.

- Las muescas transversales hacen que el clip sea resistente a deslizarse por el vaso.
- La muesca interna del clip Horizon tiene un tamaño diseñado para reducir la cizalladura del clip.



MICRO



PEQUEÑO



MEDIANO



MEDIANO-GRANDE



GRANDE

Las imágenes de los clips representan tamaños aproximados, no exactos.

EL CARTUCHO: CARGAS SENCILLAS CON LA COMODIDAD DE UN ADHESIVO

El cartucho de clips Horizon™ ofrece una carga increíblemente sencilla y precisa que puede mejorar la eficacia del procedimiento quirúrgico.

- El desplazamiento del resorte libera el clip para una carga del cartucho prácticamente sin fricción con una mano.
- Los cartuchos de clip están codificados por colores para coincidir con los aplicadores.
- El dorso adhesivo especial en el cartucho de clips Horizon permite al usuario reubicar convenientemente el sitio de carga de los clips; los cartuchos se adhieren a cualquier área estéril.



LOS APLICADORES: RENDIMIENTO Y ACCESIBILIDAD PARA LA LIMPIEZA

Específicamente diseñados para su uso con clips para ligadura Horizon, estos aplicadores reutilizables ofrecen grandes ahorros en los costos cuando se comparan con aplicadores de clips desechables de carga automática.


APLICADORES ABIERTOS

- Disponibles con mandíbulas curvas (20°), en ángulo (55°) o en ángulo recto (70°)
- Se abren por el mecanismo de bloqueo para una limpieza fácil y profunda
- Disponibles en una amplia gama de longitudes de aplicadores, incluso de 14"



APLICADORES ENDOSCÓPICOS

- Mediano, Mediano-grande y grande
- Longitud extendida disponible (cuerpo de 45 cm)
- La perilla de rotación grande y liviana permite la rotación en 360° del cuerpo del aplicador con un solo dedo
- Puerto de lavado para una limpieza profunda
- Cierre del clip diseñado para brindar a los cirujanos una confirmación táctil sólida.

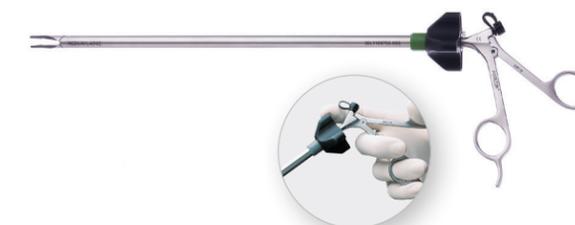

APLICADORES ESPECIALIZADOS

- El aplicador quirúrgico abierto de acceso desde múltiples ángulos Horizon 11" para cartuchos de clips pequeños (ranura ancha) incorpora una mandíbula con ángulo de 45° (o mandíbula curva) para lograr un ángulo de acceso óptimo al objetivo quirúrgico
- El aplicador de vena endosafena Horizon incorpora un diámetro de cuerpo de 5 mm con una mandíbula con ángulo de 7 mm para la ligadura de ramas venosas



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

□ Micro ■ Pequeño ■ Pequeño-Ancho ■ Mediano ■ Mediano-Grande ■ Grande

CLIPS PARA LIGADURA DE TITANIO HORIZON™				
NÚMERO DE PRODUCTO	TAMAÑO DEL CLIP	CLIPS/CARTUCHO	CARTUCHOS/CAJA	CLIPS/CAJA
005200	Micro	6	30	180
001200	Pequeño	6	30	180
001204	Pequeño	24	25	600
001201	Pequeño-ancho	6	30	180
001205	Pequeño-ancho	24	25	600
002200	Mediano	6	30	180
002204	Mediano	24	25	600
003200	Mediano-grande	6	20	120
003204	Mediano-grande	24	15	360
004200	Grande	6	20	120
004204	Grande	24	15	360



□ Micro ■ Pequeño ■ Pequeño-Ancho ■ Mediano ■ Mediano-Grande ■ Grande

APLICADORES QUIRÚRGICOS ABIERTOS			
N.º DE PRODUCTO	LONGITUD DEL APLICADOR	TAMAÑO DEL CLIP	TIPO DE MANDÍBULA*
537061	6" (15 cm)	Micro	Curvo
537081	8" (20 cm)	Micro	Curvo
137061	6" (15 cm)	Pequeño	Curvo
137081	8" (20 cm)	Pequeño	Curvo
137085	8" (20 cm)	Pequeño	Con ángulo
137111	11" (28 cm)	Pequeño	Curvo
137062	6" (15 cm)	Pequeño-ancho	Curvo
137082	8" (20 cm)	Pequeño-ancho	Curvo
137086	8" (20 cm)	Pequeño-ancho	Con ángulo
137112	11" (28 cm)	Pequeño-ancho	Curvo
237061	6" (15 cm)	Mediano	Curvo
237081	8" (20 cm)	Mediano	Curvo
237085	8" (20 cm)	Mediano	Con ángulo
237111	11" (28 cm)	Mediano	Curvo
237115	11" (28 cm)	Mediano	Con ángulo
237117	11" (28 cm)	Mediano	Ángulo recto
237141	14" (35.5 cm)	Mediano	Curvo
237145	14" (35.5 cm)	Mediano	Con ángulo
337081	8" (20 cm)	Mediano-grande	Curvo
337085	8" (20 cm)	Mediano-grande	Con ángulo
337111	11" (28 cm)	Mediano-grande	Curvo
337115	11" (28 cm)	Mediano-grande	Con ángulo
337117	11" (28 cm)	Mediano-grande	Ángulo recto
337141	14" (35.5 cm)	Mediano-grande	Curvo
337145	14" (35.5 cm)	Mediano-grande	Con ángulo
437081	8" (20 cm)	Grande	Curvo
437085	8" (20 cm)	Grande	Con ángulo
437111	11" (28 cm)	Grande	Curvo
437115	11" (28 cm)	Grande	Con ángulo
437117	11" (28 cm)	Grande	Ángulo recto
437141	14" (35.5 cm)	Grande	Curvo
437145	14" (35.5 cm)	Grande	Con ángulo

APLICADORES DE LIGADURA ENDOSCÓPICOS				
N.º DE PRODUCTO	LONGITUD DEL APLICADOR	DIÁMETRO	TAMAÑO DEL CLIP	TIPO DE MANDÍBULA
238110	12" (31 cm)	10 mm	Mediano	Endoscópico
238170	18" (45 cm)	10 mm	Mediano	Endoscópico
238200	13" (32 cm)	cuerpo 5 mm, mandíbula 7 mm	Mediano	Endosafeno
338110	12" (31 cm)	10 mm	Mediano-grande	Endoscópico
338170	18" (45 cm)	10 mm	Mediano-grande	Endoscópico
438110	14" (36 cm)	12 mm	Grande	Endoscópico
438170	18" (45 cm)	12 mm	Grande	Endoscópico

APLICADORES PARA LIGADURAS QUIRÚRGICAS ABIERTOS ESPECIALIZADOS			
N.º DE PRODUCTO	LONGITUD DEL APLICADOR	TAMAÑO DEL CLIP	TIPO DE MANDÍBULA
137117	11" (28 cm)	Pequeño-ancho	Ángulo de 45°
137118	11" (28 cm)	Pequeño-ancho	Curvo

EXTRACTOR DE CLIP DE METAL (EXTRAE TODOS LOS CLIPS DE METAL DE WECK)		
N.º DE PRODUCTO	LONGITUD DEL APLICADOR	ESTILO
523120	6.5" (16.5 cm)	Recto
523121	10.5" (26.7 cm)	Cuerpo torcido, ángulo de 30°

Los clips para ligadura de Weck® no están diseñados para su uso como dispositivo anticonceptivo de oclusión de las trompas de Falopio. Los clips para ligadura de Weck® están contraindicados para la ligadura de la arteria renal durante una nefrectomía laparoscópica de donante.

*Curvo 20°, con ángulo 55°, con ángulo recto 70°r